

Gamme contention

Systeme de contention Pinel®

Le concept Pinel® permet de satisfaire aux besoins de contention de tous niveaux avec un seul système.

Dans la contention d'urgence, le patient agressif peut être immobilisé en sept points en moins de dix secondes et ramené jusqu'à un seul point, à mesure qu'il se calme. Les patients plus passifs peuvent être maintenus au lit ou au fauteuil tout en conservant une grande mobilité et peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont sous contention.

Ce système s'adapte à tous les types de besoins de contention des institutions, soins prolongés, urgences, psychiatrie, soins intensifs...



Points forts

- ▶ Confort : Polyester + Kevlar
- ▶ Sécurité : fermeture magnétique protégée
- ▶ Hygiène : antibactérien, antifongique, anti-odeur, lavage aisé et séchage très rapide
- ▶ Liberté de mouvement : grande manœuvre dans la fixation, permettant ainsi une certaine mobilité
- ▶ Rapidité : système universel

Kit complet

Le kit contient :

- ▶ 4 attache-membres
- ▶ 1 ceinture abdominale
- ▶ 2 rallonges
- ▶ 1 extension
- ▶ 1 sangle maintien tronc
- ▶ 1 sangle pelvienne
- ▶ 1 sangle courroie de préparation
- ▶ 3 clés magnétiques
- ▶ 13 axes + verrous avec ficelle
- ▶ 2 axes + verrous
- ▶ 1 cutter d'urgence

La mallette est munie d'un code couleur, qui vous permettra de ranger facilement tous les équipements Pinel®.

Désignation	Référence
Kit complet avec mallette	SAA50100
Kit complet sans mallette	SAA50200
Mallette seule	SAA50900

Verrous et accessoires


Toutes les fixations Pinel® sont équipées d'un système de verrous efficace, rapide à mettre en place et facile à utiliser.

Le système de fermeture « axe + verrou » permet de bloquer jusqu'à 4 courroies ensemble. Ce dispositif se débloque en positionnant la clé magnétique sur le verrou.

Résistance : 500 kg.

Désignation	Référence
Clé magnétique	SAA50910
Verrou aimanté	SAA50920
Axe en inox	SAA50930
Ensemble axe + verrou	SAA50940
Ensemble axe + verrou + ficelle	SAA50950

Kit ceinture abdominale

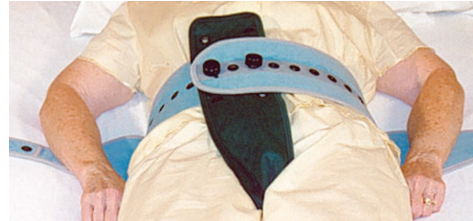

Cette ceinture abdominale permet au patient de se latéraliser et de bouger de haut en bas. La sangle pelvienne évite au patient de glisser dans le lit ou dans le fauteuil.

Ce kit comprend 1 ceinture abdominale, 2 courroies latérales libres, 1 sangle pelvienne, 2 axes + verrous et ficelle, 2 axes + verrous et 3 clés magnétiques.

Désignation	Référence
Kit ceinture abdominale petite taille (38 à 97 cm)	SAA50402
Kit ceinture abdominale taille standard (53 à 112 cm)	SAA50400
Kit ceinture abdominale grande taille (78 à 137 cm)	SAA50401
Extension pour ceinture abdominale (préconisée pour les obèses - L. 30 cm)	SAA50410
Sangle pelvienne	SAA50420

Kit attaches membres



Le kit contient 2 attaches membres, 1 clé magnétique et 4 axes + verrous et ficelle. Les attaches membres sont munies d'un système de fermeture velcro permettant un contrôle rapide et efficace des poignets et des chevilles en situation d'urgence.

Désignation	Référence
Kit attaches membres petite taille	SAA50301
Kit attaches membres taille standard	SAA50300