

Welch Allyn Pocket LED

Otoscopes,
Ophthalmoscopes et Sets

Maximisation des performances et de la durabilité dans un ensemble compact qui se transporte facilement avec vous d'un patient à l'autre.



Examinez votre patient avec style

Avec des outils de diagnostics haute performance de Welch Allyn



4 couleurs différentes :



Onyx



Plum



Vanilla



Blueberry

Personnalisez votre outil avec les accessoires :



Welch Allyn Pocket LED bumper de poignée et de la fenêtre d'Otoscope

Egalement disponible en sets :

Welch Allyn
Pocket LED Sets
avec pochette souple



Welch Allyn
Pocket LED + Sets
avec Boitier



*Les sets Pocket LED + set est fourni d'origine avec les accessoires des 4 couleurs

l'otoscope Pocket LED + est fourni d'origine avec des bumpers de la couleur de l'otoscope + la couleur blanche

l'ophtalmoscope Pocket LED + est fourni d'origine avec des bumpers de la couleur de l'otoscope + la couleur blanche

Otoscope Welch Allyn Pocket LED

- L'otoscope de poche le plus résistant du marché, basé sur des tests de chute rigoureux par rapport aux principaux concurrents
- Compact, pour vous permettre de traiter vos patients en toute situation
- Otoscope le plus léger de la gamme Welch Allyn pour un meilleur contrôle et confort
- l'éclairage par fibres optiques fourni une lumière froide sans reflets
- L'ampoule LED ne nécessite pas d'être changée (environ 15000 heures de durée de vie)



Otoscope Pocket LED +

Les mêmes caractéristiques que le Pocket LED, plus :

- Six lumens pour 2x plus d'intensité lumineuse
- 5 ans de garantie

Ophthalmoscopes Welch Allyn Pocket LED



- Doté de la technologie de lampe LED Surecolor™ de Welch Allyn conçu pour fournir la lumière dont vous avez besoin pour l'examen du fond d'œil
- Le plus léger des ophthalmoscopes Welch Allyn pour une meilleure portabilité et facilité d'utilisation
- Offrant une durabilité incomparable par rapport aux autres ophthalmoscopes du marché, cet outil est conçu pour être un outil fiable dans votre pratique
- L'ampoule LED ne nécessite pas d'être changée (environ 15000 heures de durée de vie)




Ophthalmoscope Pocket LED +

Les mêmes caractéristiques que le Pocket LED, plus

- filtre à densité neutre pour virtuellement éliminer les reflets de la cornée
- Support en caoutchouc pour plus de confort pendant l'examen
- 5 ans de garantie

Technologie Welch Allyn SureColor LED

WELCH ALLYN
SURECOLOR™ LED

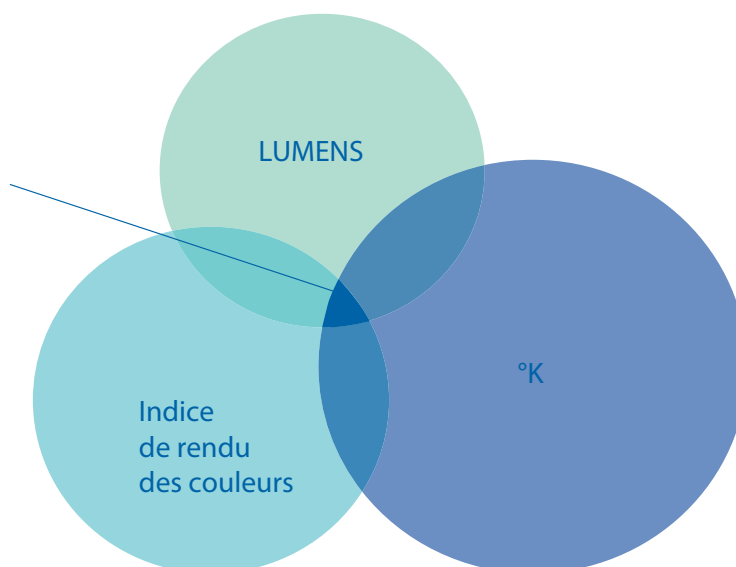

La différence Welch Allyn LED

Avec le bon équilibre entre la température de couleur, l'aspect de la couleur (ou CRI) et la luminosité, nous avons optimisé la technologie LED pour les instruments d'ORL.

Les lampes LED Welch Allyn sont conçues pour durer jusqu'à 20 000 heures


Les lampes LED Welch Allyn vous offrent une vraie couleur des tissus, plus de clarté et une meilleure définition du canal auriculaire et du fond de l'oeil

Le remplacement de l'ampoule n'est pas nécessaire

Welch Allyn Pocket LED & Pocket LED + - Ophthalmoscope

Caractéristiques Produit :



	Pocket LED Ophthalmoscope	Pocket LED + Ophthalmoscope 
Référence	Noir : WEL130, Blanc : WEL131 Mauve : WEL132 , Bleu : WEL133	Noir : WEL134, Blanc : WEL135 Mauve : WEL136 , Bleu : WEL137
Hauteur	17.5 cm	17.5 cm
Largeur tête	3.0 cm	3.0 cm
Profondeur tête	2.8 cm	2.8 cm
Diamètre poignée	2.1 cm	2.1 cm
Poids tête et poignée	70g	70g
Type Batterie	AA Alkaline x 2	AA Alkaline x 2
Durée de vie batterie	>5 hrs	>5 hrs
Type ampoule	SureColor LED	SureColor LED
Durée de vie ampoule	10,000 à 20,000 heures	10,000 à 20,000 heures
Efficacité	1.8	1.8
PLage dioptre	'-20 to +20	'-20 to +20
Intervalles dioptre	'-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	'-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20
Type filtre	Eliminant le rouge, cobalt bleu	Eliminant le rouge, Densité neutre Cobalt Bleu
Diaphragmes	5 (Petit, Moyen, Grand, fente, Fixation)	5 (Petit, Moyen, Grand, fente, Fixation)
Flux en lumens grand diaphragme	.2 à .45 lumens	.2 à .45 lumens
Zone d'illumination	11.4 mm à une distance de 50 mm	11.4 mm à une distance de 50 mm
Contenu	Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum	Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum + 2 bumeurs (1 de la couleur et 1 blanc) + Pochette souple



Couleurs disponibles :
Noir, Bleu, Mauve, Blanc

Welch Allyn Otoscope Pocket LED & Pocket LED +

Caractéristiques Produit :



	Otoscope Pocket LED	Otoscope Pocket LED + 
Référence	Noir : WEL114, Blanc : WEL115 Mauve : WEL116, Bleu : WEL117	Noir : WEL118, Blanc : WEL119 Mauve : WEL120, Bleu : WEL121
Hauteur	16.8 cm	16.8 cm
Largeur	3.0 cm	3.0 cm
Profondeur	5.1 cm	5.1 cm
Diamètre poignée	2.1 cm	2.1 cm
Poids (no batteries)	71.7 g	71.7 g
Batteries:	AA Alkaline x 2	AA Alkaline x 2
Durée de vie batteries:	>5 hrs	>5 hrs
Ampoule :	SureColor LED	SureColor LED
Durée de vie ampoule :	10,000 à 20,000 heures	10,000 à 20,000 heures
Type éclairage	Fibres optiques	Fibres optiques
Efficience (lumens/watt)	10.3	10.3
Agrandissement	3.4X	3.4X
Dioptre	13.6	13.6
Distance d'utilisation	6.5 mm à 4 mm speculum tip	6.5 mm from 4 mm speculum tip
Resolution avec Speculum	3 - 6 lp/mm	3 - 6 lp/mm
Profondeur de champs avec Speculum	0 à 11 mm depuis la pointe du speculum	0 à 11 mm depuis la pointe du speculum
Distance focale	73.45 mm	73.45 mm
Field of Illumination/Distribution at FO	34.1 mm @ 50 mm distance from tip	34.1 mm @ 50 mm distance from tip
Spectroscopie ultraviolet-visible	0%/99.47%/0.53%	0%/99.47%/0.53%
Raccord de soufflerie pour test pneumatique	Oui	Oui
Intensité	1240 lux avec un speculum de 4 mm	1540 lux avec un speculum de 4 mm
Garantie	3 ans	5 ans
Contenu	Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum	Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum + 2 bumpers (1 de la couleur et 1 blanc) + Pochette souple



Couleurs disponible :
Noire, Bleu, Mauve, Blanc