

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes et les lève-personnes fixés au plafond permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

## SANGLE HAMAC ÉCO



Compatible avec  
la tête amovible  
(TAMOV-PF).




Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.



Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.



HA-PF-TU / HAG-PF-TU / HA3-RBA-PF-TU



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



v 05.02/23

## Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



# SANGLE HAMAC ÉCO

TAILLE & DIMENSIONS (en cm)

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| <b>TU</b> | <b>A</b> | 74  |
|           | <b>B</b> | 121 |

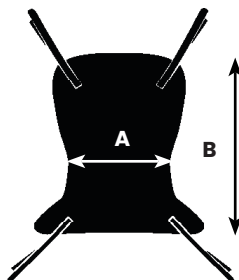

## Modèle filet

Composition  
Filet 100 % polyester  
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN  
Biais sangle polyester 40 mm

## Modèle tissu

Composition  
Jersey 100 % polyester  
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN  
Mousse PE 50 kg/m3  
Biais sangle polyester 40 mm

- Latéraliser le patient. Plier le hamac en 2 suivant l'axe vertical.
- Positionner la pliure selon l'axe vertical au milieu du dos du patient.
- Poser la moitié de la sangle sur le côté libre du patient.
- Plier le côté de la sangle du côté en appui du patient.
- Retourner le patient sur le dos avec la moitié de la sangle posée sur le côté libre.
- Relatéraliser le patient sur la sangle sur le côté antérieurement libre.
- Dégager la partie précédemment pliée et l'étaler.
- Mettre le patient sur le dos sur la sangle déployée.
- Accrocher les suspentes hautes et basses au milieu du LP.

## PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

## INSTALLATION DE LA TÊTIÈRE (OPTION)

La tête amovible TAMOV-PF est disponible en option sur les modèles de sangles de toilette éco, l'installation de celle-ci se fait comme suit:

TAMOV-PF : La tête amovible se glisse entre la sangle et le patient, elle permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple..