


# SANGLE À DOSSERET



- Sangle avec tête en mousse rigide
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort\* uniquement (\*Confort = jambières en mousse)



<b>S</b>	A	58
	B	90
	C	66
<b>M</b>	A	65
	B	96
	C	76
<b>L</b>	A	69
	B	99
	C	80
<b>XL</b>	A	74
	B	104
	C	89

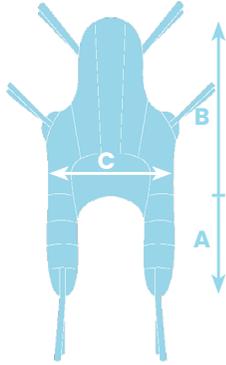

La partie dos prolongée par la tête en mousse rigide et le baleinage complet permet de prendre en charge la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.

Sa forme en U, associée à la partie filet sous-fessière, permet une mise en place et un retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

## RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

## POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES\*

### RÉFÉRENCES

SGLDOS-PF- **S M L XL**  
(jersey confort)

Prix public T.T.C.  
(TVA 5,5%)

190,00 €