



GIMA

PACK TEST HÉLIX DE BOWIE DICK


Code: 35951

Catégorie: Tests stérilisation

Unité de Vente: boîte de 100 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical

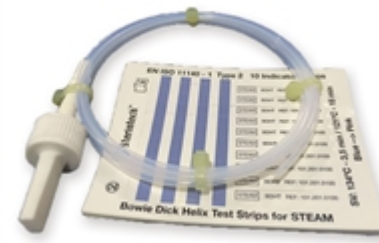

EAN13: 8023279359510

Descriptif: PAQUET TEST HELIX DE BOWIE ET DICK

- boîte de 100 unités
- inclut: sac en coton, dispositif à hélice (tube 1,5 m), 100 tests et mode d'emploi (GB, FR, IT, ES)

Les dispositifs Helix et leurs indicateurs détectent les problèmes de stérilisation de chaque cycle bien avant les autres indicateurs/ intégrateurs chimiques.

La norme EN 285:2009 indique que les tests Helix (Hollow A) doivent être utilisés comme les tests de Bowie et Dick ainsi que comme contrôle des quantités lors des stérilisations de charges creuses dans les hôpitaux.

En outre le test Helix de Bowie et Dick est obligatoire pour les stérilisateurs classe B Bench Top Steam.

- conforme aux normes ISO 11140 - 1 type 2 - EN 867 partie 5 classe B
- transition nette de la couleur en rose
- facile à interpréter et documenter
- non-toxique/sans plomb
- PCD garanti pour 500 cycles (134°C - 3,5 min)

Spécifications Techniques:

Standard accessories: