



GIMA

THERMOSOUDEUSE GIMA GD-301 EVO - complète


Code: 35929

Catégorie: Thermosoudeuse

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical

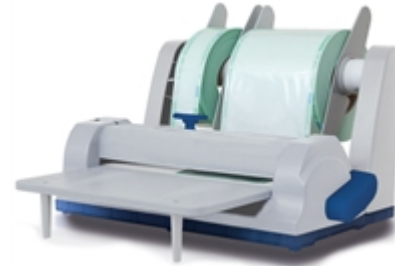

EAN13: 8023279359299

Descriptif: SOUDEUSE GD-301 EVO - appareil complet, avec porterouleau de soudure, lame de découpage et niveau.

Soudeuse manuelle pour sachets médicaux et rouleaux correspondants au DIN 58953-7:2008. Nouveaux modèles avec 3 éléments chauffants en céramique pour souder plus rapidement et d'une manière plus précise; système amélioré en entrée et sortie pour garder le film à plat et en éviter tout mouvement à l'intérieur de la soudeuse.

Facile à utiliser, fiable et extrêmement compact, idéal en dentisterie et pour les laboratoires médicaux et vétérinaires.

Barre de soudure de 300 mm actionnée manuellement par un levier.

Contrôle continu de la température de la soudure, pour économiser des consommables.

Compact en position verticale pour réduire l'espace utilisé au minimum.

Porte-rouleau intégré et amovible, qui peut être utilisé à part.

Utilisable uniquement avec papier médical PP et/ou sachets en plastique indiqués pour la stérilisation à la vapeur.

Spécifications Techniques:

- Joint de soudure: 12 mm
- Longueur de la soudure: 300 mm
- Température de soudure continuellement contrôlée
- Dispositif de coupe intégré
- Température et durée de soudure fixes
- Activation manuelle
- Alimentation: 230 V / 50-60 Hz, monophasé
- Entrée électrique: 900 W
- Indice de protection: IP 20
- Dimensions de la soudeuse: 452 x 248 x 146 mm
- Dimensions du porte-rouleau: 458 x 412 x 242 mm

Standard accessories: